



循環方式

ハイレベルなクリーン環境と優れた操作性をお約束!
LEDランプを搭載しました!



循環方式(片面)
AH-100・AH-130・AH-160・AH-180・AH-200



循環方式(両面)
AH-130W・AH-160W



循環方式(両面)
AH-205W・AH-205WS
(但し、AH-205WSのみ蛍光灯仕様ですので注意してください)


広い作業空間、高さ750mmで快適作業!

■ 特長

- ① ワークエリアは、低圧損失のHEPAフィルター(0.3 μ m 粒子99.99%以上集塵効率)により清浄空気が吹きつけ、外気の流入はエアーカーテン機構と前面開口部により防ぎます。
- ② 大きな側面ガラス(片面タイプ)により、作業者に与える圧迫感を最小限にとどめました。又、排気口にHEPAフィルターを採用しているのでクリーンベンチ内の温度上昇を最小限にとどめるとともに内部の空気をそのまま流出しません。
- ③ 高性能風速センサにより、HEPAフィルターの寿命を前面インジケータで表示します。フィルター交換時期は警報ランプにより知らせます。
- ④ 作業面は工具なしで簡単に取りはずすことができるのでワークエリア内をいつも清潔に保つことができます。又、LED、蛍光灯、殺菌灯および、グロー球交換も行うことができます。
- ⑤ 風量コントロール、ステージウォーマーをオプションで搭載できます。



風速センサーとエアーカーテン機構

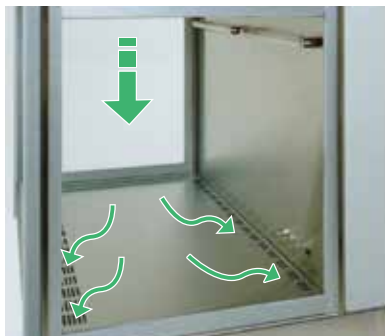

大きな側面ガラスと作業面



ガスバーナー(標準装備)

バーナーON・OFF用のフットスイッチも付属します。
 ■ 都市ガス(CG-10) ¥17,000
 ■ LPガス(CG-30) ¥18,000 それぞれ御指定下さい。

オプション

電子着火バーナー K50E ¥75,000
 同上用フットスイッチ CF-05A ¥8,000
 (バイオクリーンベンチ専用)



アスピレーター(オプション)

CA-25 ¥150,000

ワークエリア内でアスピレーターとして使用することができます。
 キャスター、フットスイッチも付属します。
 (到達圧力24Kpa)

- 外寸法350(W)×200(D)×400(H)mm
- 吸引ビン3L(大)、250ml(小)

■ 仕様

型 式	片面タイプ					両面タイプ			
	AH-100	AH-130	AH-160	AH-180	AH-200	AH-130W	AH-160W	AH-205W	AH-205WS
清 浄 度	ISO-5(クラス100)								
外形寸法(H×D)	1,920					1,850			
	1,000×750	1,300×750	1,600×750	1,800×750	2,000×750	1,300×750	1,600×750	2,050×750	2,050×1,000
作業台寸法(H×D)	750(スライドガラス最大開口高700)								
	950×610	1,250×610	1,550×610	1,750×610	1,950×610	1,025×690	1,325×690	1,550×690	1,550×940
方 式	循環方式								
排気用フィルター	W305×D305×H65 低圧損設計 圧力損失10mmH ₂ O 規定風量2.2m ³ /min								
集 塵 効 率	99.99%(0.3 μ m粒子)以上								
L E D ラ ン プ	4本 28W	5本 35W	6本 42W		8本 56W	4本 28W	5本 35W	6本 42W	蛍光灯30W×4本
製 品 質 量	200kg	260kg	300kg	335kg	365kg	230kg	270kg	320kg	350kg
電 源	AC100V 50/60Hz								
負 荷 電 力	400VA		500VA	800VA	820VA	400VA		800VA	
サーキットブレーカー	8A 5A (コンセント)				10A 5A (コンセント)		8A 5A (コンセント)		10A 5A (コンセント)
価 格	¥1,100,000	¥1,200,000	¥1,350,000	¥1,600,000	¥1,700,000	¥1,350,000	¥1,500,000	¥1,700,000	¥1,950,000

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。