



NLO-10/NLO-20/NLO-30

液体窒素レベル監視装置


液体窒素の残量を重量で管理します！



重量センサーによるリアルタイムの重量を表示

液体窒素保存容器を管理する上で重要な残量経過を目視する事が可能です。2段階アラームにより微細な真空漏れもいち早く感知します。外部監視に繋げる事により、メール/携帯電話へお知らせする事も可能です。

単位：mm

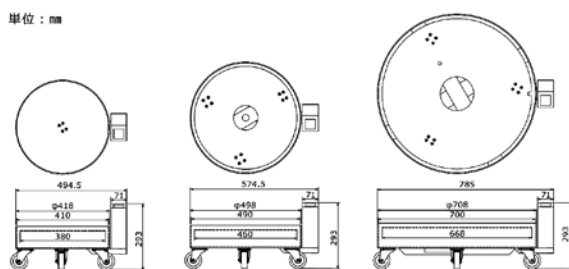

特 長

- 載せるだけで液体窒素保存容器の重量を表示
- 設定した重量になるとランプの点滅とアラームで警報
- 警報監視システムARMSでの管理が可能
- キャスター付きで移動らくらく

万が一に備えた、メールお知らせ機能。



弊社取扱製品と接続(CISAS/V4、KR3000、LabKeeper)を行い、メール通報、携帯電話へのお知らせ・リアルタイムでの液体窒素残量を確認出来、管理が可能です。充填時期を事前に予測できるため、管理体制を整える事が出来ます。



アラームは、SMS、音声通話、電子メールを介して携帯電話、タブレット、またはPCに送信するように設定されています。

キャスター機能



液体窒素の補充やサンプル取り出し/収納時に移動しやすいようにキャスターが付いています。収納も机下等、限られたスペースでも対応可能です。様々な状況に応じた転倒防止対策の提案も可能です。

型 式	NLO-10	NLO-20	NLO-30
対 荷 重 量	Max 200Kg	Max 200Kg	Max 200Kg
アナログ出力	0~5V	0~5V	0~5V
検 知 出 力	2点(上限・下限設定)	2点(上限・下限設定)	2点(上限・下限設定)
オートゼロ機構	有り	有り	有り
時間ドリフト	無し	無し	無し
容器台直径	410mm φ	490mm φ	700mm φ
電 源	AC100V 50/60Hz 1A	AC100V 50/60Hz 1A	AC100V 50/60Hz 1A
価 格(税別)	¥350,000	¥370,000	¥400,000

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。



Cryo-Sentry Low Level Alarm

低レベルアラーム



ICBiomedical



¥250,000(税別)~



特 長

- LN₂の残量が容器容量の25%以下になった時、視覚的警報とアラーム音で充填時期をお知らせします。
- LEVEL CHECKボタンを押すと容器の上蓋を外すことなくLN₂水位をランプの色や点滅状況、そしてアラーム音でお知らせし、センサーケーブルの断線の有無も同時に確認できます。
- AC電源または乾電池(単三電池4本)で使用できます。電池使用の場合、電池寿命が短くなるとアラーム音とLEDランプでお知らせします。(AC電源と乾電池の併用は出来ませんのでご注意ください)

【対応モデル】

XT20、XT21、XT34、AI24、HC20、HC34、HC35、VHC35、VHC38、LS750、LS3000、LS4800、LS6000

※表示価格に消費税は含まれておりません。