


温度・ガス濃度他を記録し異常発生時には、メール送信でお知らせします！
 本体のみで稼働するオールインワンタイプ(PC不要)

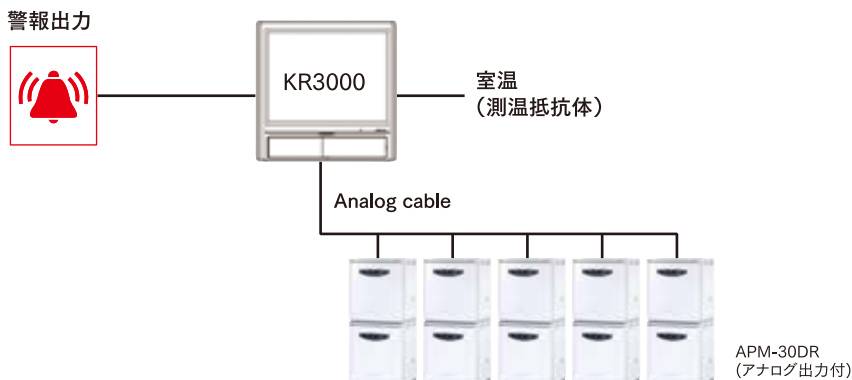

特 長

- CO₂ガスインキュベーターやフリーザーなど機器の温度やガス濃度など複数チャンネルの情報を測定し、収集したデータを加工することで、各々の製品状態をトレンドグラフ、バーグラフ、数値など各種表示することができます。
- 内部メモリとCFカードへのデータ記録とその再生が可能です。またデータは、Excel等の市販ソフトにより活用できます。
- 視認性に優れた12.1インチTFTカラー液晶ディスプレイは、タッチパネル対応となっており、各種操作が直感的に簡単にできます。
- ブラウザによるWebサーバー機能、ファイル転送、Eメール送信といった警報通知などのアプリケーションに対応しています。

【本体仕様】

(寸法単位=mm)

型 式	KR3000
測 定 点 数	36点
入 力 種 類	フルマルチレンジ(熱電対、測温抵抗体、直流電圧、電流)
内 部 メ モ リ	フラッシュメモリ 8MB
外 部 メ モ リ	CFカード(32MB～2GB)128MB標準付属
設 定 数	各点最大4設定
警 報 種 類	上限、下限、差上限、差下限(不感帯設定可能)、異常データ
表 示 器	12.1インチTFTカラーLCD
表 示 種 類	測定データ表示(トレンド、数値、バーグラフ) ヒストリカル表示(リアルタイムトレンドと同時表示可) 情報表示(警報、マーカ、ファイルリスト) 設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信等)
電 源	100-240V AC 50/60Hz
最 大 消 費 電 力	65VA
製 品 質 量	7.2Kg
価 格 (税別)	¥1,500,000

※本製品の各データは、当社基準で測定されております。

ANG-25 | N₂ GAS GENERATOR **窒素ガス発生装置**



特 長

- マルチガスインキュベーターへの窒素ガス供給を安全、手軽に！
- 空気中に存在する窒素ガスを吸着剤で高純度分離！
- ボンベ交換の手間から開放！
- オイルフリースクロールコンプレッサによる小型化・低騒音の実現！



(寸法単位=mm)

型 式	ANG-25
窒 素 ガ ス 発 生 量	22NL/min(≒25L/min)
窒 素 ガ ス 純 度	99vol%
吐 出 圧 力	0.4MPa
酸 素 濃 度 表 示 範 囲	0～1.999%
圧 力 ス イ ッ チ 運 転 方 式	ON→0.35, OFF→0.45Mpa
外 形 寸 法	480×730×1225
電 源	AC100V 50/60Hz 12A
製 品 質 量	120kg
価 格 (税別)	¥3,500,000

※安全のため、単独で電源をお取り下さい。

【窒素空気タンク】

(寸法単位=mm)

型 式	SAT-60C-100	SAT-120C-140	SAT-220C-140	SAT-400C-140
タ ン ク 容 積	60L	120L	220L	400L
外 形 寸 法	480φ×1200	583φ×1370	610φ×1800	830φ×1715
窒 素 充 填 量	約266L	約532L	約976L	約1776L
製 品 質 量	30kg	60kg	95kg	175kg
価 格 (税別)	¥180,000	¥280,000	¥350,000	¥650,000

・専用レギュレーター [GF1-003--JN-VZ] ¥75,000(税別)

※窒素ガス充填量は、標準気圧で換算※他配管が必要な場合がありますのでお問い合わせください。

※表示価格に消費税は含まれておりません。

※表示価格に消費税は含まれておりません。