

GAS ANALYZER / AGA-2021  
**オートガスアナライザー**



**CO<sub>2</sub>/マルチインキュベーターのガス濃度測定が可能です！  
 小型化により持ち運びが簡単！（重さ2.0kg）**

**2点校正で精度抜群**

CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>ガスセンサそれぞれをキャリブレーション(2点校正)できます。

**IR(赤外線)センサとガルバニ電池式センサを搭載**

環境に影響されず、CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>ガス濃度を正確に測定します。

**携帯性**

充電式バッテリー内蔵で小型・軽量化を実現。

**低価格**

信頼性の高い測定を可能にし、低価格化を実現しました。

**操作性**

ガス濃度測定は、ワンタッチ操作で簡単に行う事ができます。

		(寸法単位=mm)
型 式		AGA-2021
CO <sub>2</sub> センサ		IRセンサ
CO <sub>2</sub> 測定範囲		0~22.0%
CO <sub>2</sub> 測定精度		±0.1%
O <sub>2</sub> センサ		ガルバニ電池式
O <sub>2</sub> 測定範囲		0~18.0%
O <sub>2</sub> 測定精度		±0.1%
製品質量		2.0kg
電 源		AC100V 50/60Hz 0.43A
外形寸法		W170×D170×H100
バッテリー動作時間		連続動作4時間(新品時) <sup>※1</sup>
価 格(税別)		¥330,000

※1バッテリー動作時間は、測定回数等により短くなる場合があります。  
 ※本製品の各データは、当社基準で測定されております。  
 ・交換用ラインフィルター [KBS-1] ¥7,000(税別)



「ガス切れから大切な細胞を守ります」 GAS GUARD / GS-701  
**ガスガードシステム**



**ガスポンベの交換は大丈夫？**

CO<sub>2</sub>インキュベーター用のガスポンベを2本接続します。使用中のポンベが空になると自動的に予備のポンベに切り替わります。また、切り替わり時にアラームでお知らせ致します。手動でガスポンベを切り替えることもできます。

		(寸法単位=mm)
型 式		GS-701
使用ガス		インキュベーター用炭酸ガス、窒素ガス、酸素ガス
作 動 圧 力		0.01MPa以下
ガス 接 続 口		IN側 外径φ6mm×2本 OUT側外径φ6mm×1本
外形寸法		W215×D340×H94
電 源		AC100V 50/60Hz 1A
製品質量		4.5kg
価 格(税別)		¥210,000

REGULATOR / IM-055  
**レギュレーター**



**インキュベーター用に設計！**

2段減圧式の圧力調整器です。インキュベーターで使いやすいスケール表示ですので低圧領域での微妙な調整が簡単にできます。

型 式	IM-055
1次圧力計(目盛)	0~25MPa(1MPa)
2次圧力計(目盛)	0~0.3MPa(1MPa)
ホースニップル	適合チューブ内径5mm
価 格(税別)	¥40,000

※ガスポンベ取付工具付属※アステックビニールホース内径5mm×外径8mmを使用

※表示価格に消費税は含まれておりません。

IM-811/IM-833/IM-011/IM-033  
**80L・163L専用標準架台**



80L・163Lインキュベーターを架台に固定できます。また、架台を床や壁に固定させるツールが別途用意されております。

インキュベーター架台(キャスター付)80L用  
 [IM-811] W599×D504×H618mm 重量21kg  
 ¥77,000(税別)

インキュベーター架台(キャスター付)163L用  
 [IM-011] W700×D635×H600mm 重量21kg  
 ¥64,000(税別)

インキュベーター架台(2連用キャスター付)80L用  
 [IM-833] W599×D504×H272mm 重量15kg  
 ¥77,000(税別)

インキュベーター架台(2連用キャスター付)163L用  
 [IM-033] W700×D635×H150mm 重量18kg  
 ¥77,000(税別)


「コンタミネーション予防」 IF-200/160/80/30/15  
**集塵フィルターキット**



**チャンバー内の清浄化に！**

浮遊する塵・カビ胞子をトラップし庫内汚染の発生を軽減させます。フィルターの材質はガラスペーパーで0.3μmのポアサイズです。

品 名	型 式	適 合 機 種	価 格(税別)
標準集塵フィルターキット	IF-200	SCA-165シリーズ・CPI-165シリーズ CPI-475シリーズ	¥30,000
	IF-160	WCI-165シリーズ	¥23,000
	IF-80	SCA-80シリーズ	¥24,000
	IF-50	AP-50シリーズ	¥24,000
標準集塵フィルター後付キット	IF-30	AP-30シリーズ	¥23,000
	IF-50-1	AP-50シリーズ	¥27,000
標準集塵フィルター交換用	IF-30-1	AP-30シリーズ	¥30,000
	IF-15	全機種	¥21,000

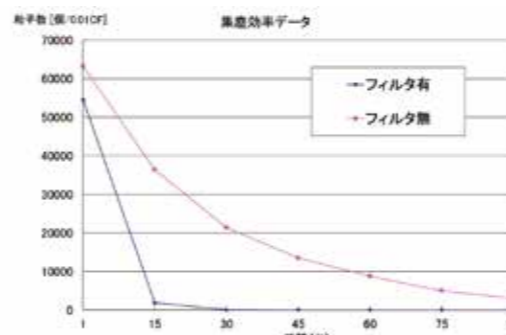

※扉30秒解放後の0.01CF、0.3μm粒子数を測定。

品 名	型 式	適 合 機 種	価 格(税別)
薄型集塵フィルターキット	IF-200T	SCA-165シリーズ・CPI-165シリーズ CPI-475シリーズ	¥26,000
	IF-160T	WCI-165シリーズ	¥23,000
	IF-80T	SCA-80シリーズ	¥26,000
	IF-50T	AP-50シリーズ	¥24,000
	IF-30T	AP-30シリーズ	¥23,000
薄型集塵フィルター後付キット	IF-30A	SCA-30シリーズ	¥24,000
	IF-50T-1	AP-50シリーズ	¥29,000
薄型集塵フィルター交換用	IF-30T-1	AP-30シリーズ	¥32,000
	IF-15T	全機種	¥21,000

※フィルターの交換推奨時期は1年です。


Shelves And Shelf Brackets  
**棚板・ブラケット・半トレー**



ステンレス鋼板製です。表面は滑らかで安定しています。ブラケットは、2本1組になっており取り付けが簡単です。

品 名	型 式	適 合 機 種	寸 法 ( m m )	価 格(税別)
棚 板	165001	SCA-165シリーズ・CPI-165シリーズ	W435×D435×H11	¥15,000
ブラケット(2本/組)	165002	WCI-165シリーズ	—	¥12,000
棚板SCA80	800001	SCA-80シリーズ	W350×D350×H11	¥12,000
ブラケット(2本/組)	800002		—	¥8,500
棚板APC50	500001	AP-50シリーズ	W338×D332×H7	¥10,000
ブラケット(2本/組)	500002		—	¥8,000
棚板APC30	360001	AP-30シリーズ	W280×D266×H7	¥9,000
ブラケット(2本/組)	360002		—	¥7,000
棚板SCA30	300001	SCA-30シリーズ	W252×D297×H8	¥9,500
ブラケット(2本/組)	300002		—	¥8,500

※用途により特注を承ります。

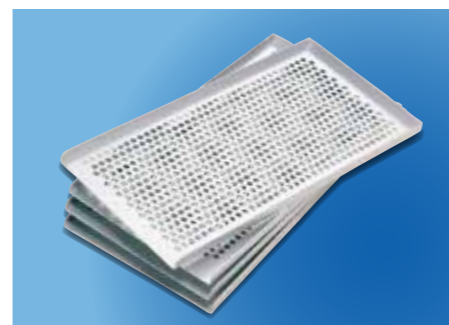

棚板1段に2枚入れることができます。材質により2種類用意されています。軽量なので取り扱いやすく作業効率を高めます。

品 名	型 式	適 合 機 種	寸 法 ( m m )	価 格(税別)
アルミ半トレー	165003	SCA-165シリーズ・CPI-165シリーズ	W200×D400×H10	¥13,000
ステンレス半トレー	165008	WCI-165シリーズ		¥11,000
ステンレス半トレー	800008	SCA-80シリーズ	W164×D340×H11	¥8,000

※表示価格に消費税は含まれておりません。