

37%OFF

キャンペーン期間 2023年11月中旬～
2024年3月31日受注分まで

 astec

VCI-165

ダイレクトヒート型
CO₂/ マルチガスインキュベーター

アケズニカクニ
チイサク
カシコイ



キャンペーン価格 ¥805,000 (税抜き)

CO₂インキュベーター 最新のフラッグシップモデル
細胞のリアルタイムデータを液晶画面で確認する事が可能に！

- ☑ 温度・ガス濃度精度はそのままに、庫内部品の高減量化
- ☑ 従来品より高さがマイナス 10cm
- ☑ スタイリッシュデザイン (両扉付け替え可)
- ☑ 細胞モニター V-moni による細胞管理
- ☑ 160℃乾熱滅菌仕様

現状に妥協せず、常に進化を目指す。
アステックの開発にかける情熱を凝縮した一台です。

省スペース・省エネ設計。庫内を開けずに細胞観察が可能！




従来品と比べ10cm
高さを低く設計。
2段積みの上段も使
い易くなりました。

扉の開閉方向の変更が可能
設置状況により、標準右開きから左開きへの変更が可能になりました。



専用設計の細胞モニターをご用意！

庫内を開けずに細胞観察可能
庫内背面にある専用ポートを経由し本体液晶モニターに画像出力します。画像データはUSBにて取得が可能です。

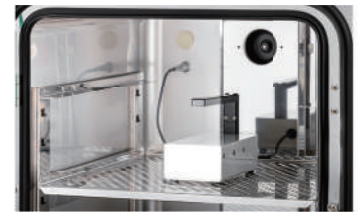

【細胞モニター V-moni】

乾熱滅菌 (160℃) 機能搭載

コンタミネーション対策としてCO₂インキュベーターの滅菌は乾熱滅菌が一番適しています。パネル操作だけで滅菌動作を開始できます。2段重ね時に、1台滅菌中でも、もう1台の培養への影響はなく、15A電源での2台同時乾熱滅菌も可能です。



乾熱滅菌中

通常培養中

※写真はイメージです。

メモ機能


視認性が高く操作しやすい画面。画面右のメモ欄には細胞名や使用者の入力が可能。インキュベーターをシェアしてご使用の場合、管理に有用です。



簡単操作で細胞を撮影

各種解析機能付き

インキュベーターの液晶画面から庫内の培養細胞の観察が可能になります。Live映像・Capture・Time-Lapseが可能。デリッシュを取り出さずにLive映像を確認し、細胞へのストレスを軽減します。

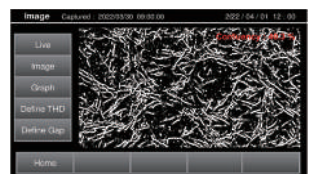

Analysis 機能



グラフ機能

ログ・イベント機能

<ログ画面>
庫内の温度、CO₂濃度、O₂濃度(※1)をログ表示します。
※1：VMI-165Pシリーズのみの仕様です。

<イベント画面>
主に各種アラームの発生や、機能制御のON/OFFなどが表示されます。



※1：VMI-165P/VMI-165Sシリーズのみの仕様です。
※上記のようなグラフ表示で確認も可能です。

庫内棚受けの軽量化

棚板強度は損なわず、従来の棚受けを無くし清掃し易い環境を実現しました。



培養器製造に情熱をかけて半世紀。私たちは、いつも側に寄り添っています。

お客様と共に歩んで半世紀。アステックのネットワークは世界にも広がり、支店は全国に5カ所展開。企画から開発、製造、販売、アフターサービスまで一貫した体制のアステックだからこそ、これからも長いお付き合いができる。それが強みです。

＜お問合せ先＞

■札幌営業所
TEL：011-780-4485 (代)

■大阪営業所
TEL：06-6838-3108

■東京営業所
TEL：03-3834-4485

■福岡営業所
TEL：092-935-5685

■名古屋営業所
TEL：052-526-1618



株式会社アステック

811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号
TEL：092-935-5585
URL：https://www.astec-bio.com



アステック本社 HP



細胞科学研究所 HP



Instagram

VCI-165の詳細はこちら



（製品ページ）